



Genio S TAM OTOMATİK ELEKTROFOREZ SİSTEMİ

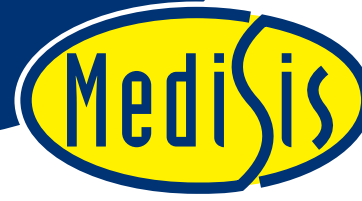

Medikal Sistemler Ltd.

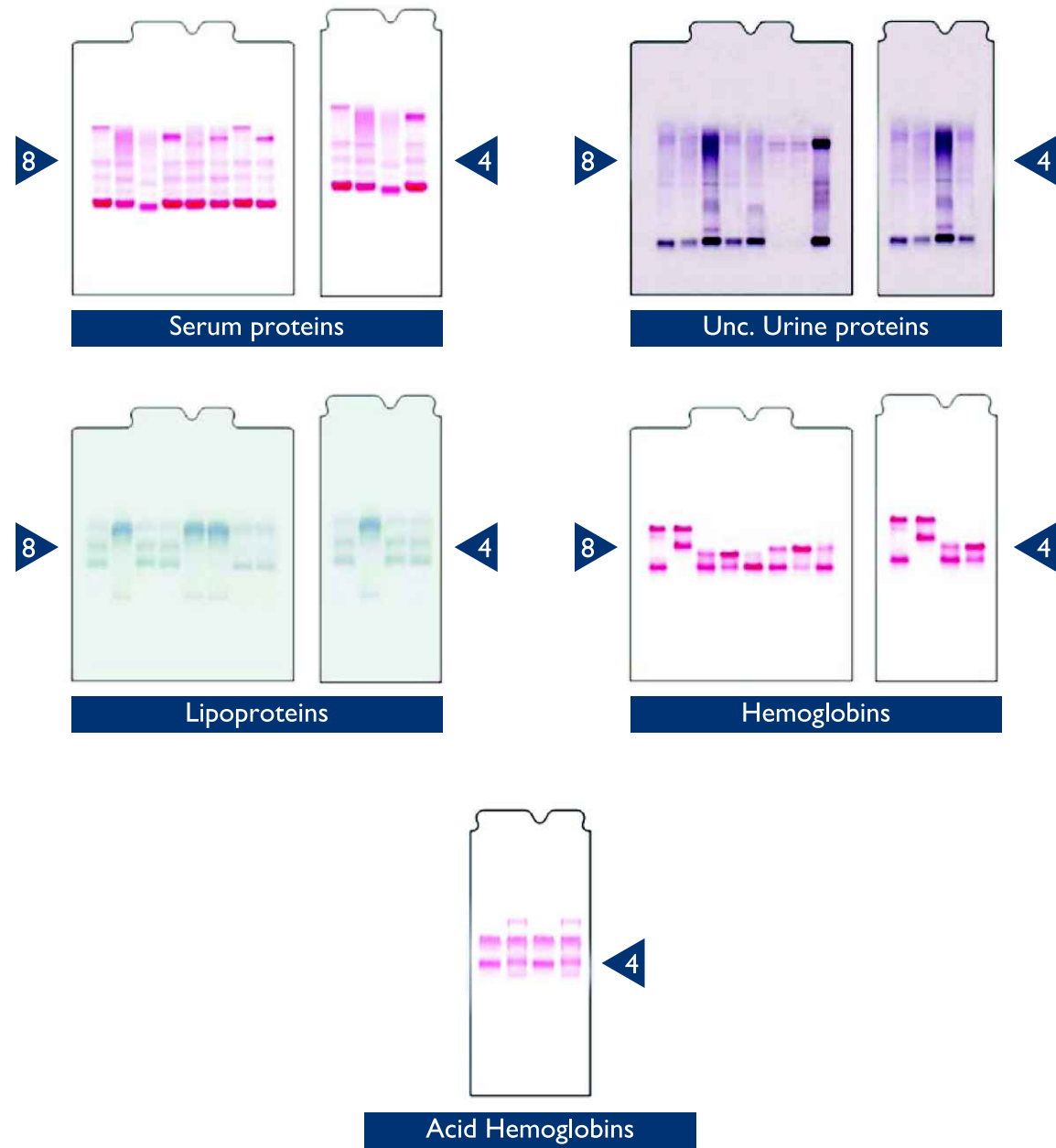

Genio S, ölçüleri küçük (46x41x42 cm), ancak fonksiyonları çok büyük olan bir tam otomatik elektroforez sistemidir.

Bu küçük ölçüler içine migration chamber, reaktif tankları, diyer, reaksiyon plate, 8 kanallı densitometre, microcontroller, LCD display ve keyboard yerleştirilmiştir.

- Genio S ile, elektroforezin tüm aşamaları izlenebilmektedir.
- Cihaz, oldukça az miktarda reaktif kullanmaktadır.

Sample Plate Aplikatör

Aplikatör, mikroteknikle çalışan 8 bağımsız çelik uçtan oluşmaktadır. Sample plate 8 ve 4 kuyucukludur. Densitometre, 8 okuma kanalına sahiptir ve hızlı okuma yapmaktadır. Elektroforez bantları okuması, yüksek duyarlılıkta yapılmaktadır.

Migration Chamber

İki uzun (Carbonium) elektroda sahip olan monoblok migration chamber, strip üzerinde dengeli dağılımla, mükemmel bantlar oluşmasını sağlar.

Software

Elfolab en son versiyon yazılımdır.

Anlaşılır ve duyarlı raporlar ortaya çıkmasını sağlar.

Genio S ile Hangi Testler Yapılabilir?

Genio S, seluloz asetat yöntemiyle çalışan tam otomatik bir elektroforez sistemidir.

Şu testler otomatik olarak gerçekleştirilir:

- Serum Protein Elektroforezi
- İdrar Protein Elektroforezi
- BOS (CSF) Protein Elektroforezi
- Lipoprotein Elektroforezi
- Hemoglobin Elektroforezi (Alkalen)
- Hemoglobin Elektroforezi (Asit)

Kit Ambalajları

Protein elektroforezi

: Her strip üzerinde 8 örnek çalışılabilen 384 testlik ve
Her strip üzerinde 4 örnek çalışılabilen 192 testlik

Hemoglobin elektroforezi


: Her strip üzerinde 8 örnek çalışılabilen 384 testlik ve
Her strip üzerinde 4 örnek çalışılabilen 192 testlik
(Alkalen h. için 4 örnek, 96 testlik)

Lipoprotein elektroforezi

: Her strip üzerinde 8 örnek çalışılabilen 192 testlik ve
Her strip üzerinde 4 örnek çalışılabilen 96 testlik

İdrar protein ve BOS elektroforezi: Her strip üzerinde 4 örnek çalışılabilen 48 test ile kit ambalaj seçenekleri mevcuttur.

YEREL TEMSİLCİ




MediSis Medikal Sistemler Ltd. Şti.
Bağdat Cad. İhlamur Çık. No: 2/1 Feneryolu-Kadıköy / İST.
Tel: (0216) 346 26 93 - 346 61 31 Fax: (0216) 349 30 61
E mail: medisis@superonline.com www.medisismedical.com

Genio S

POWERING THE TIME



MULTI REAGENT TANK

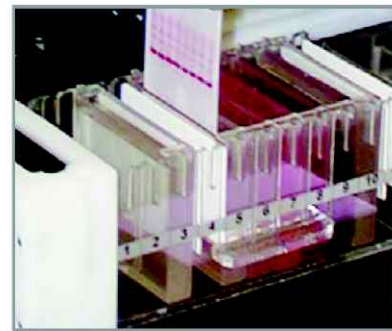


MAGNETIC HEAD



DRYER



APPLICATOR SAMPLE PLATE

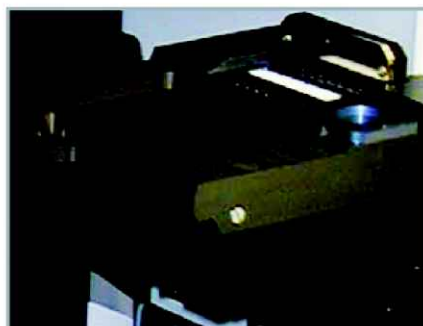

MIGRATION CHAMBER

